

Vibby OAK

Enhetsinformation & Kom igång-guide

Vad är Vibby OAK?

- Den **första automatiska fallsensorn** på marknaden
- Utformad och tillverkad av franska **Vitalbase**
- Kan bäras både runt **handeden** och som ett **halsband**
- Inbyggd **manuell larmknapp** som kan ersätta befintlig larmknapp




Hur fungerar falldetektorn?

Vibby OAK använder innovativa algoritmer och extra sensorer som automatiskt känner av tunga fall

Ett tungt fall består av fyra faser:

1. En person står stilla eller är i rörelse (går)
2. Personen tappar balansen vilket resulterar i en snabb och plötslig rörelse neråt
3. Personen ramlar och träffar marken vilket ger en kraftig och signifikant påverkan på kroppen
4. Personen ligger på marken med eller utan aktivitet

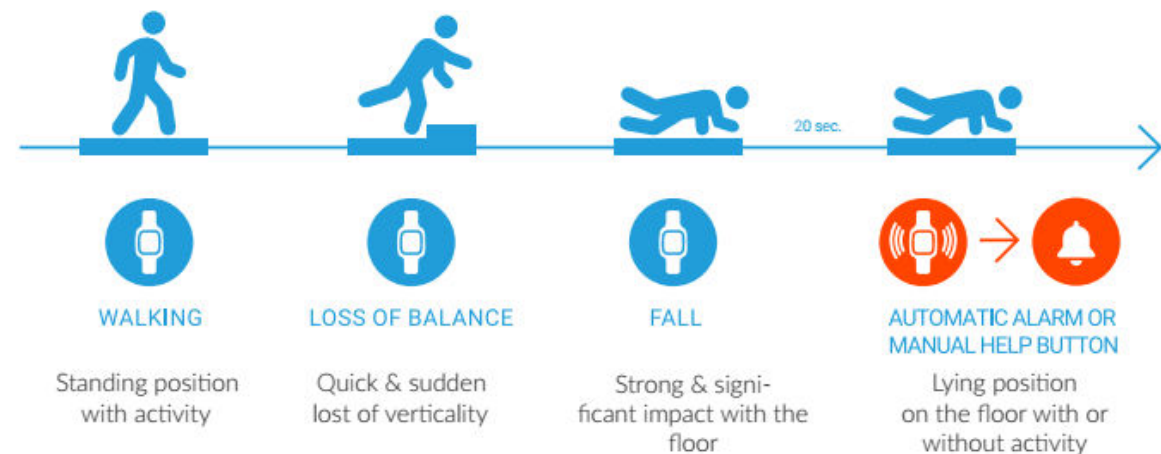

Avbryta / Annulera ett larm

Vibby OAK blinkar och vibrerar i 20 sekunder innan ett larm skickas.

Larmet kan avbrytas på följande sätt:

- Användaren ställer sig upp och förblir ståendes i mer än 6 sekunder
- Täck fallsensorn med handflatan i 2 sekunder. Ta sedan bort handen så fort Vibby OAK har slutat vibrera




Enkel konfigurerering via mobilapp

Vibby OAK måste ställas in beroende på hur den ska bäras (runt handleden eller halsen)

Då den har inbyggd Bluetooth utförs konfigureringen enkelt via en app på mobilen.

I appen kan man även se Vibby OAKs batteristatus.

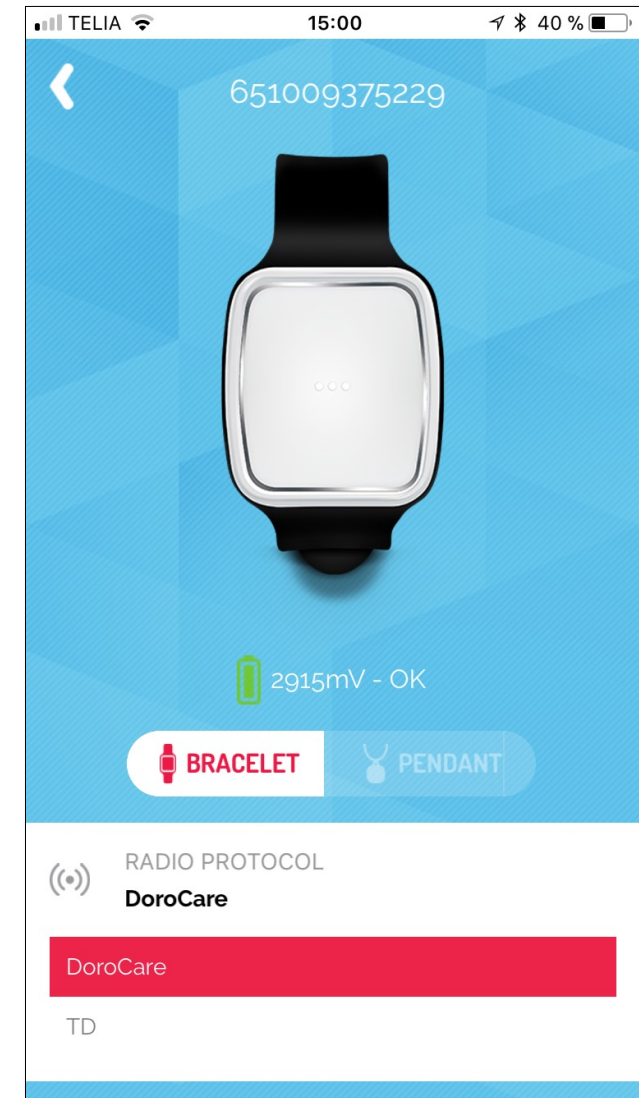

Byta batteri

När det börjar bli dags att byta batteri skickas ett automatiskt larm till larmcentralen/WEBaccess.

För att byta batteri behövs ett specialverktyg (art.nr. 300 191).

Vibby OAK behåller sin vattentäthet (IP67). Det är dock rekommenderat att byta tätningsslist (art.nr. 300 195) i samband med batteribytet.

Batteri: Sony CR2477





Teknisk information

- Vattentät (IP67) och stöttålig
- Inbyggd vibrationsmotor
- Bluetooth
- Icke-allergiframkallande gummi & rostfritt stål (FDA)
- Upp till 2 års batterlivslängd
- Automatiska batterilarm och funktionskontroller
- Radiofrekvens 869,2 Mhz
(tvåvägs sändare / mottagare)

Artikelnummer

Artikelnummer	Namn	Beskrivning
300 187	Vibby OAK	Fallsensor med larmknapp
300 190	Batteri, Lithium, CR2477, Vibby OAK	Batteri
300 191	Batteribytesverktyg, Vibby OAK	Verktyg för att byta batteri
300 195	Tätningarring, O-ring, Vibby OAK	Tätningarring av gummi. Sitter mellan batteri och hölje för att uppnå täthet och kapslingsklassning. Bör bytas i samband med batteribyte.
300 196	Halsband, Vibby OAK	Halsband, Svart
300 197	Armband, Vibby OAK	Armband, Svart
300 198 – 300 202	Armband, Vibby OAK	Armband, Ljusblå, Röd, Lila, Mörkblå, Mörkgrå

Beställning görs på careium.com



Vibby OAK

Kom igång



Innehåll


- [Mobilappen Vibby](#) [s11]
- [Vibby OAKs olika lägen](#) [s12]
 - [Hur vet jag vilket läge Vibby OAK är i?](#) [s13]
- [Lagringsläge \(storage mode\)](#) [s14]
- [Installationsläge \(configuration mode\)](#) [s15]
- [Aktivt läge \(active mode\)](#) [s16]
- [Bärar-inställning och batteri](#) [s17]
- [Byta armband och halsband](#) [s18]

VIBBY

Ladda ner appen *Vibby* till din mobiltelefon



Scanna QR koden med din
mobilkamera eller QR läsare.

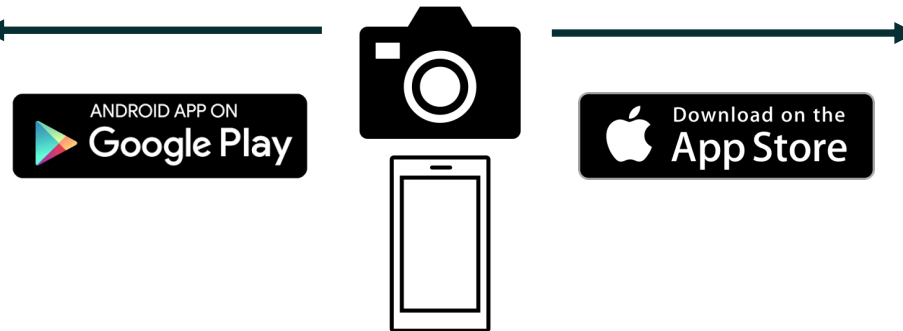

Inloggningsuppgifter till appen *Vibby*

Användarnamn: **dorocare@vitalbase.fr**

Lösenord: **dc2016**

Vibby OAKs olika lägen



Lagringsläge (storage mode)

Viloläge för när den lagerhålls
I lagringsläget är antenner och
sensorer avstängda
Batterisparande



Installationsläge (configuration mode)

**Konfigurera och ändra
inställningar**
Det är i installationsläge man
kopplar samman enheten med
appen *Vibby*.



Aktivt läge (active mode)

Vibby OAK ska vara i aktivt läge
när **den används av
omsorgstagaren.**

Hur vet jag vilket läge Vibby OAK är i?



Lagringsläge (storage mode)

Ett **dubbelt tryck** på larmknappen genererar en blinkande grön lysdiod samt vibration.

Ett **kort tryck*** på larmknappen genererar varken lysdiod eller vibration.



Installationsläge (configuration mode)

En grön lysdiod blinkar snabbt.



Aktivt läge (active mode)

En röd lysdiod lyser efter Ett **kort tryck*** på larmknappen.

*kort tryck = c:a 1 sekund

Lagringsläge / Storage mode


Vibby OAK är automatiskt i Lagringsläge från fabrik. Lagringsläge minskar strömförbrukningen och om enheten ska förvaras (ex. efter tidigare aktiv användning) och därför ska sättas i lagringsläge, följ dessa steg:



Vibby OAK bekräftar att den är i lagringsläge genom att **vibrera** och att **den röda lysdioden är tänd**.

Installationsläge / Configuration mode

I Installationsläge kan man ändra och kontrollera inställningar. För att sätta Vibby OAK i installationsläge så måste den först vara i [Lagringsläge](#). Följ dessa steg för att sätta Vibby OAK i installationsläge:

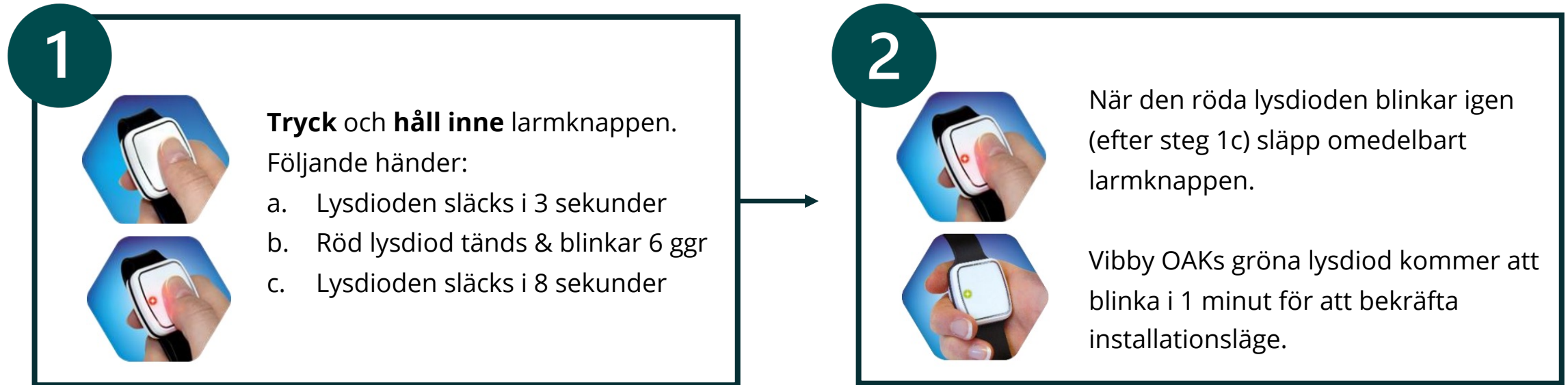

Glöm inte att åter sätta Vibby OAK [Aktivt läge](#) innan användning!

Aktivt läge / Active mode

Lämna lagringsläge / storage mode

Innan användning av Vibby OAK måste den sättas i Aktivt läge - d.v.s. lämna lagringsläge. Följ dessa steg:

1



Tryck och håll inne
larmknappen

2



Släpp omedelbart
larmknappen när den
röda lysdioden tänts

3

Vibby OAK **vibrerar för att bekräfta** Aktivt läge.

Den kommer sedan att hamna i **demo-läge**. Detta märks av att **den gröna lysdioden blinkar var femte (5) sekund**.

När Vibby OAK lämnar demo-läge vibrerar den och en grön lysdioden blinkar 6 gånger.

Bärar-inställning & batteri

För att kontrollera att Vibby OAK är inställd på att bäras runt handleden eller runt halsen, eller för att kontrollera batteristatus, gör följande:

1

Sätt Vibby OAK i [Installationsläge](#)

2


Öppna appen *Vibby* i din mobil

3

I appen kan du välja bärar-inställning. Välj mellan **Bracelet** (armband) eller **Pendant** (halsband)

Glöm inte att åter sätta Vibby OAK [Aktivt läge](#) innan användning!

Batteristatus

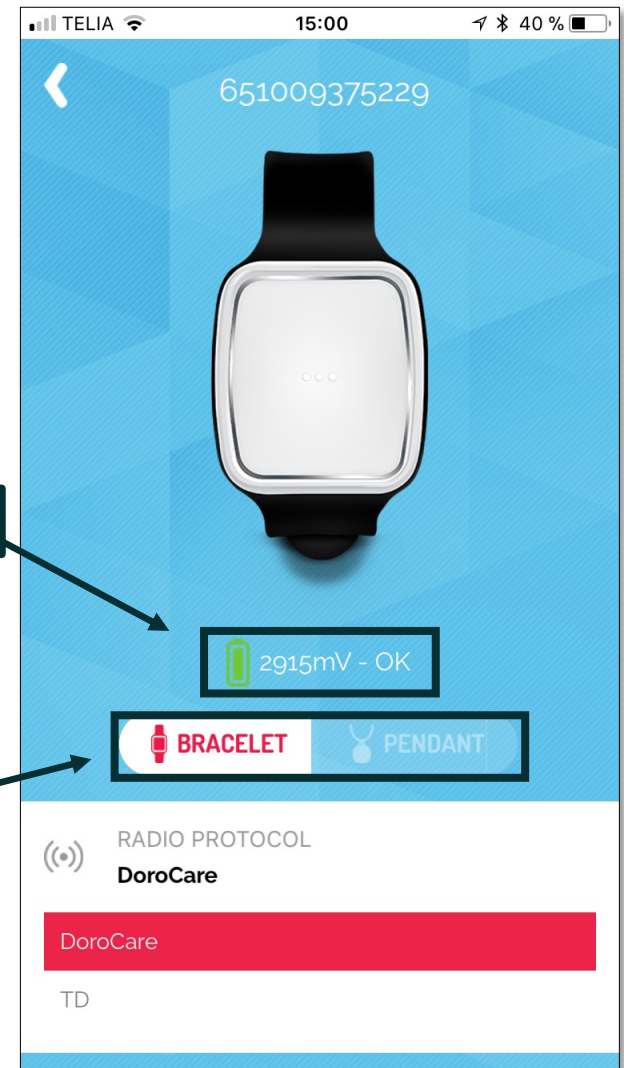

Byte av armband & halsband

Det är viktigt att det blir korrekt när man byter armband eller halsband på Vibby OAK.
"Flärparna" måste sättas på rätt sätt:



"Flärparna" sticker ut



"Flärparna" ska petas in i
dom små hålen som finns
på Vibby OAK



Om installationen är
korrekt syns inte
"flärparna" på varken
ovan- eller undersidan

Har du frågor?

010 482 90 00

support.care@careium.com