

Automatisk falldetektor*

Vibby OAK måste bäras hela tiden, antingen som ett armband eller ett halsband. Används den på annat sätt kan det leda till falsklarm och problem, till exempel att fall inte upptäcks.

Installatören anpassar Vibby OAK för användning som armband eller halsband. Den får inte bäras på annat sätt än det som ställts in. Installatören måste informeras på förhand om en förändring är nödvändig.



FUNKTIONER

Manuellt larm (bild 1):

Det sitter en larmknapp i mitten av Vibby OAK. Knappen har en enkel och tydlig fysisk design som gör det lätt för brukaren att utlösa larmet.

Automatiskt larm (bild 2):

Baserat på en uppsättning sensorer kombinerat med en innovativ algoritm kan ett larm utlösas automatiskt om ett tungt fall* upptäcks. 20 sekunder efter att ett tungt fall upptäckts och innan larmet sänds till mottagaren vibrerar och blinkar Vibby OAK i 20 sekunder. Om brukaren vill annullera larmet räcker det att hålla handflatan över Vibby OAK. När enheten slutar vibrera, ta bort handen.

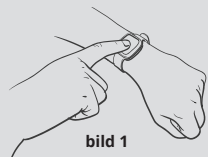


bild 1



bild 2

TEKNISK INFORMATION

Vikt: 35g

Vattentålighet: IP67

Stöttålighet: IK04

Rengöring: bare såpe och vann

Typ av plast: hypoallergen

	Radiofrekvens	Ström
ISM	869.2125 och 869.2375 MHz	-8 dBm
BLE	2400 – 2483.5 MHz	-5 dBm

Övervakning av radiotilkoblingen mellan Vibby OAK och sändaren.

Radiorekkevidde: 300 m i öppet rum / område med hinder.

Drifttemperatur: +5 °C / +40 °C

Batterilevetid: CR2477 / LiMnO₂

• Opptil 1 år.

• Batteriet må skiftes av installatören.

Lagringsanbefaling

• Temperaturen: +10°C~+25°C

• Fuktighet: fra 40% til 95%

FORORDNING OG SIKKERHET

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette at Vibby OAK utviklet av Vitalbase, Telecom Design healthcare division, samsvarer med hovedkravene og andre tilhørende bestemmelser i EU-direktivene 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS-2) og EF 1907/2006: NO_SVHC REACH. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på <http://docs.vitalbase.fr>

Elektrisk og elektronisk avfall (WEEE)

Fjerning av elektrisk og elektronisk avfall fra husholdninger i EU. Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. Det er ditt ansvar å levere kassert utstyr til et returpunkt for innsamling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Hvis du ønsker mer informasjon om disse innsamlingspunktene, kan du kontakte kommunen, en avfallsstasjon eller forhandleren. Når batterier samles inn samtidig med elektrisk og elektronisk avfall, må de først fjernes fra utstyret i samsvar med direktiv 2002/96/EF.

AKTA: Batteri

- Batteriet får ikke svelges, risk for kemisk brannskada.
- Denna produkt innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet svelgs kan det på bara två timmar vålla allvarliga invärtes brännskador som kan leda till döden.
- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om batterifacket inte kan stängas ordentligt, sluta att använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn. Om du misstänker att någon har svält ett batteri eller fört in det i en kroppspöppning, kontakta vården omgående.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut mot en felaktig batterityp.
- Om ett batteri kastas i öppen eld, placeras i en varm ugn eller krossas eller skärs sönder kan en explosion inträffa.
- Om ett batteri placeras i en miljö med mycket hög omgivningstemperatur kan detta leda till en explosion eller ett läckage av brandfarlig vätska eller gas.



IP 67



***VIKTIG:** Noen fall (dempede fall, kontrollert nedsenking mot vegg eller stol ...) registreres ikke av Vibby OAK. Basert på detekteringsteknologier tillater ikke løsningen analyse og tolkning av alle fallsituasjoner. Ved å trykke på knappen

kan brukeren når som helst utløse alarmen manuelt hvis det er behov for det. Du finner mer informasjon om registrering av automatiske fall og bruk av produktet på:

www.vitalbase.care