

CAREIUM 450

MOBIL SOCIAL ALARM



Brugsanvisning

Dansk

Indhold

1	Sikkerhedsinformation	3
2	Vigtig information	3
2.1	Medicinske enheder	4
2.1.1	Implanteret medicinsk udstyr	4
2.2	Specifik absorptionshastighed (SAR)	5
3	Emballagens indhold.....	5
4	Beskrivelse	6
5	Alarmer	6
5.1	Nødopkaldsalarm.....	6
5.2	Faldalarm	7
5.3	Geohegnsalarm	7
5.4	Tekniske alarmer	8
6	Positionering	8
7	Afsendelse af SMS.....	8
8	Careium 450 og dockingstation, set forfra og fra siden	9
9	Diagram over knapper, LED'er, lyde og vibrationer	10
9.1	Careium 450, den bærbare enhed	10
9.2	Careium 450, dockingstation.....	11
10	Installation.....	11
11	Konfiguration og indstillinger	12
11.1	Tilladelse af indgående opkald.....	12
11.2	Svartilstand	12
11.3	Alarmbackupnummer	12
11.4	Alarmforsinkelse	13
11.5	Faldalarmens følsomhed	13
11.6	Strømindikator	13
11.7	Sideknap.....	13
11.8	Geohegn.....	13
11.9	Adgangsrettigheder	14
12	Vedligeholdelse	14
12.1	Rengøring.....	14
12.2	Genbrug.....	14
13	Tekniske data	15
13.1	Careium 450, den bærbare enhed	15
13.2	Opladningsholder/beacon	16
13.3	Strømforsyning	16
13.4	Miljø.....	16

14 Miljøoplysninger	17
14.1 Korrekt bortskaffelse af produkter	17
14.2 Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt	18
15 EU-overensstemmelseserklæring	18
16 UK-overensstemmelseserklæring.....	18

1 Sikkerhedsinformation

- Brugere bør være særligt opmærksomme på risikoen for interferens fra andre systemer, der arbejder på samme eller tilstødende frekvensbånd.
- Careium 450 kan og må ikke skilles ad.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet isættes forkert. Reducer risikoen for brand eller forbrændinger ved aldrig at adskille, knuse eller punktere batteriet eller kortslutte de udvendige kontakter, udsætte batteriet for temperaturer over 60 °C (140° F) eller for ekstremt lavt lufttryk eller bortskaffe det i ild eller vand. Brugte batterier skal genbruges eller bortskaffes i henhold til lokale regler eller den vejledning, der fulgte med produktet.
- Benyt kun den anbefalede strømforsyning, som er angivet i afsnittet [Strømforsyning](#).
- Stikkontakten skal være placeret i nærheden af Careium-opladerudstyret og skal være let tilgængelig.
- Følg altid de regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og sluk altid for enheden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan virke forstyrrende eller indebære en risiko. Enheden må kun anvendes i de normale brugersituationer. Enheden må aldrig anvendes ved driftstemperaturer over 40 °C eller under -10 °C.

2 Vigtig information

Alle systemer, der bruger radio- og telekommunikation, er udsat for elektriske forstyrrelser (interferens), som er uden for brugerens kontrol.

Produkter fra Careium er konstrueret til at minimere virkningen af disse forstyrrelser. Ikke desto

mindre skal brugeren være opmærksom på, at systemkomponenter kan være udsat for interferens eller andre forstyrrelser, der kan forårsage funktionsfejl.

Det er derfor vigtigt at kontrollere regelmæssigt, at hver enkelt del i systemet fungerer på alle områder, navnlig hvad angår radiokommunikation. Kontakt din leverandør med det samme, hvis du har mistanke om funktionsfejl.

Hold produktet væk fra forstyrrende enheder såsom radiosendere, mobiltelefoner, DECT-telefoner eller trådløse hovedtelefoner.

Brugere skal være særligt opmærksomme på risikoen for forstyrrelser fra produkter, som kommunikerer på den samme eller tilstødende frekvensbånd.

Kontakt din leverandør for at få yderligere oplysninger.

2.1 Medicinske enheder

Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller udstyrets producent for at afgøre, om det har tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har spørgsmål. Hvis

der er opslag på sygehuse og lignende med påbud om, at du skal slukke for enheden, når du er der, skal du overholde dette. Sygehuse anvender ofte udstyr, der kan være følsomt over for eksterne radiosignaler.

2.1.1 Implanteret medicinsk udstyr

For at forebygge potentiel interferens anbefaler producenter af implanteret medicinsk udstyr,

at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem trådløst udstyr og medicinsk udstyr. Personer, der bærer denne form for udstyr, skal:

- Altid holde det trådløse udstyr mindst 15 cm fra det medicinske udstyr.
- Undgå at bære enheden i en brystlomme.
- Holde det trådløse udstyr til det øre, der er modsat det medicinske udstyr.

Hvis du har begrundet mistanke om, at der foregår interferens, skal du straks slukke for telefonen. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan bruge trådløst udstyr sammen med implanteret udstyr,

skal du tale med din læge.

2.2 Specifik absorptionshastighed (SAR)

Denne enhed opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering af radiobølger.

Din mobilenhed er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride grænserne

for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felter forårsaget af radiofrekvenser), som anbefales i de internationale retningslinjer fra den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

Retningslinjerne for eksponering

for radiobølger benytter en måleenhed, som kaldes den specifikke absorptionshastighed eller SAR (specific absorption rate).

SAR-grænsen for mobilenheder er to W/kg i gennemsnit fordelt over 10 gram væv, og den

omfatter en væsentlig sikkerhedsmargin, der skal tage højde for alles sikkerhed uanset alder

og sundhedstilstand. SAR-tests udføres ved hjælp af standardiserede betjeningspositioner,

mens enheden sender på højeste certificerede effektniveau på alle afprøvede frekvensbånd.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af dette udstyr er:

Kroppens SAR: 1,373 W/kg

Ved normal brug er SAR-værdierne for denne enhed sædvanligvis et godt stykke under værdierne, der fremgår ovenfor. Dette skyldes, at din mobilenheds udgangseffekt automatisk reduceres,

når opkaldet ikke kræver fuld effekt. Reduktionen

sker af hensyn til systemeffektiviteten og for at mindske forstyrrelser i netværket. Jo lavere enhedens udgangseffekt er, desto lavere er dens SAR-værdi.

3 Emballagens indhold

- Careium 450
- Opladningsholder/beacon
- Strømforsyning
- Strop
- Vejledning til hurtig opstart

4 Beskrivelse

Careium 450 er en lille og behagelig GPS-baseret mobil tryghedsalarm, som både forbedrer sikkerheden

i hjemmet, men også alle andre steder, hvor brugeren befinder sig. Den er nem at bære hele tiden, enten i en lomme eller som vedhæng rundt om halsen, og den er vandtæt (IP67). Når brugeren trykker på tryghedsknappen, sendes der en alarm til den overvågende central, og med den indbyggede højttaler kan brugeren tale med den overvågende centrals uddannede personale.

GPS, wi-fi og beaconpositionering samarbejder alle for at vise brugerens placering, og den har

også en avanceret sporings- og geofencingfunktion med en indbygget energibesparelseteknologi,

så batterilevetiden forlænges. En mobil social alarm gør det lettere for seniorerne at opretholde

en aktiv livsstil. Alarmen bør sendes direkte til en overvågende central, et familiemedlem eller plejepersonale. Tjenesten kan sættes op som en mobil, social alarm eller en GPS-sporingsalarm.

En mobil social alarm tilskynder den ældre til og hjælper denne med at forblive aktiv og bevæge

sig frit rundt uden for hjemmet, samtidig med at den giver tryghedsfølelse.

5 Alarmer

5.1 Nødopkaldsalarm

Denne alarm udløses via SOS-knappen på forsiden af enheden. Tre korte tryk i træk, eller et langt

tre sekunders tryk aktiverer alarmen.

5.2 Faldalarm

Enhedens indbyggede faldalgoritme kan have to følsomhedsniveauer – høj eller normal.

Hvis enheden registrerer et fald, kontrollerer den for bevægelse eller skridt i en periode på

30 sekunder, efter at faldet fandt sted. Hvis der registreres bevægelse eller skridt inden for denne periode, vil enheden annullere faldalarmen. Denne sekvens er lydløs, og brugeren vil ikke vide,

at enheden har registreret et fald og derefter annullerede det.

Hvis enheden registrerer et fald, vil brugeren blive advaret med et bip hvert sekund de efterfølgende 30 sekunder. I løbet af disse 30 sekunder kan faldalarmen annulleres af brugeren ved et tryk på sideknappen.

Bemærk! En falsk alarm annulleres, hvis der registreres bevægelse efter faldet. Hvis enheden placeres på en hård overflade, f.eks. et bord, og derefter ikke flyttes, kan det generere en falsk alarm.

5.3 Geohegnsalarm

Der kan indstilles to typer geohegnsalarmer i Careium 450. Indstillingerne foretages via i-care® online. Hegnet skal defineres således, at målet, f.eks. et hus, en sø osv., er i midten af hegnet. Hegnets radius må ikke være mindre end 100 m.

- Inden for geohegnet
 - Hvis enheden bevæger sig inden for dette hegn, udløses alarmer
 - Der kan opsættes to indre zoner for geohegnet
- Uden for geohegnet
 - Hvis enheden bevæger sig uden for hegnet, afsendes alarmer
 - En beacon skal befinde sig inden for dette hegn
 - Der kan opsættes én ydre zone for geohegnet

5.4 Tekniske alarmer

- Tænd
- Alarm for slukning
- Alarm for lavt batteriniveau
- Alarm for kritisk lavt batteriniveau (EOL-alarm)
- Alarm for fuldt batteri
- Alarm for testtransmission

6 Positionering

Enhedens position kan bestemmes på fire forskellige måder. GPS (og Glonass), wi-fi, LBS og via beacon.

Hvert 3. minut bestemmer enheden sin position, undtagen når den ikke er i bevægelse, som i nedenstående tilfælde:

- Statisk. Definitionen af statisk er syv minutter uden bevægelse. Bevægelsen bestemmes af accelerometeret i enheden.
- I kontakt med mindst én beacon.

Satellitpositionering har højeste prioritet. Nøjagtigheden er ofte omkring 10-100 m.

Wi-fi-positionen bestemmes af to eller flere mac-adresser, der hentes fra de omgivende Wi-fi-netværk. Nøjagtigheden er ofte omkring 10-100 m.

Basestationens position bestemmes af data fra to eller flere GSM-basestationer, som enheden

har inden for rækkevidde. Nøjagtigheden er ofte mindre end 1.000 m.

Beacon. Hvis en beacon, der er registreret som "hjemme", er inden for rækkevidde, ved systemet, at brugeren er hjemme.


7 Afsendelse af SMS

Enheden kan sende en foruddefineret tekstbesked til en foruddefineret modtager.


SMS'en sendes ved at trykke på enhedens sideknop. Der afspilles en lyd og en vibration for at bekræfte, at SMS'en bliver sendt.

SMS'en vil indeholde et link med en position på et Google-kort.

8 Careium 450 og dockingstation, set forfra og fra siden

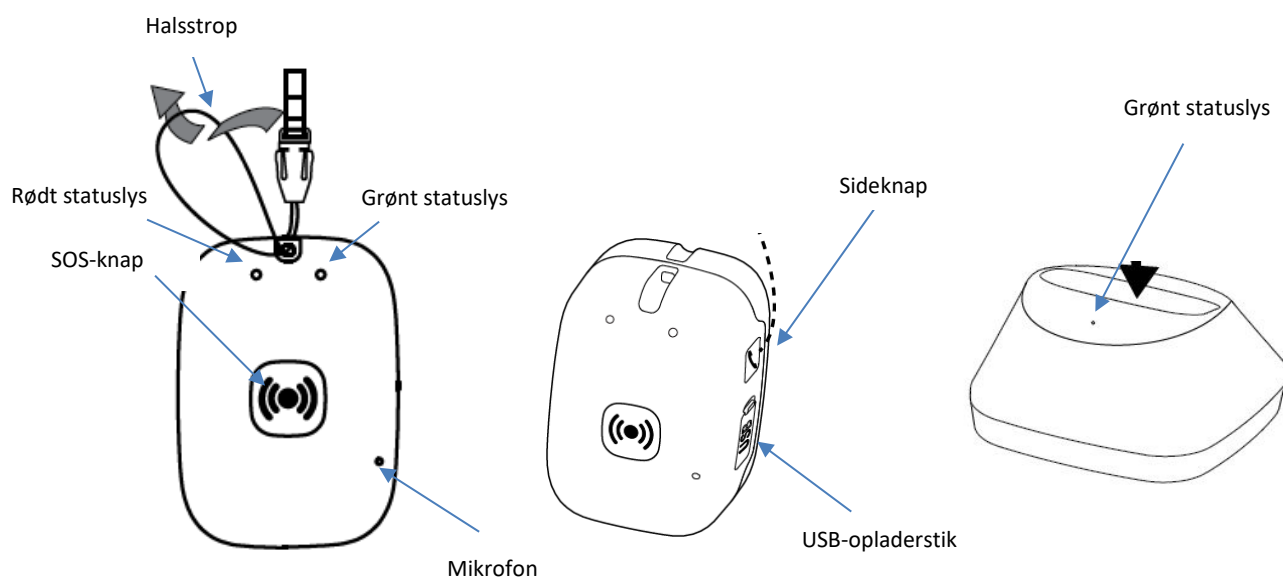

Hver indikator kan kun lyse i én farve, men den kan have forskellige blinkmønstre afhængigt af status. Eksempel med alle tre indikatorer aktiveret.

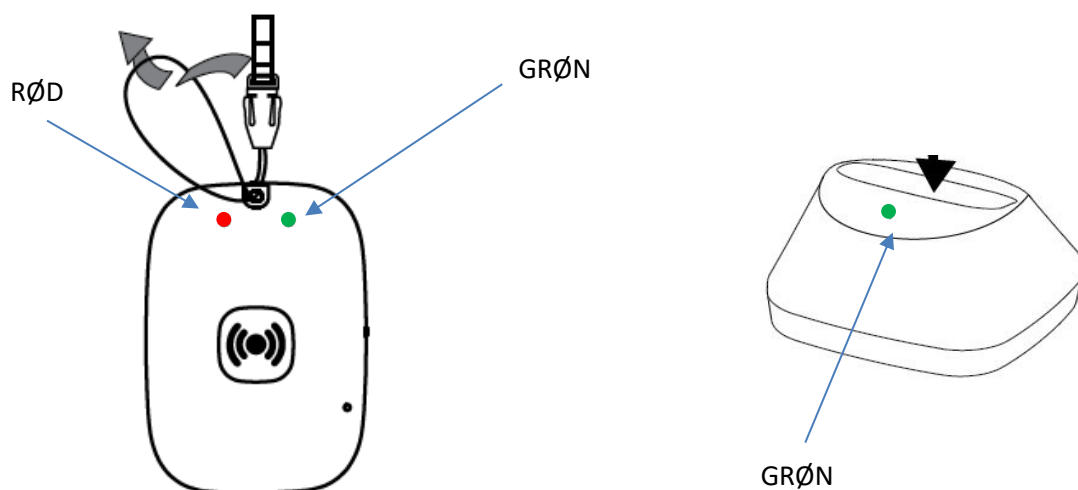

9 Diagram over knapper, LED'er, lyde og vibrationer

9.1 Careium 450, den bærbare enhed

Status/funktion	Handling	Grøn LED	Rød LED	Lyd	Vibrator
Slå til	Tryk på sideknappen i to sekunder, eller sæt enheden i opladeren.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Lang vibration
Standbytilstand	Ikke relevant	Kort blink hvert 3. sekund	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Oplader	Ikke relevant	Langt blink hvert 3. sekund	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Fuldt opladet	Ikke relevant	Lyser	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Alarm (ingen forsinkelse)	SOS-knap, tryk i tre sekunder, eller tryk hurtigt tre gange	Kort blink, indtil opkaldet tilsluttes (eller timeout)	Kort blink, indtil opkaldet tilsluttes (eller timeout)	Høj tone i 3 sekunder	Vibration i 3 sekunder
Alarm (forsinkelsesperiode)	SOS-knap, tryk i tre sekunder, eller tryk hurtigt tre gange	Kort blink, indtil opkaldet annulleres eller tilsluttes (eller timeout)	Kort blink, indtil opkaldet annulleres eller tilsluttes (eller timeout)	Høj tone i 30 sekunder eller indtil annullering	Vibration i 30 sekunder eller indtil annullering
Annullering af alarm (ved forsinkelse)	Sideknap	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Faldalarm	Annuller: Sideknap	Kort blink, indtil opkaldet annulleres eller tilsluttes (eller timeout)	Kort blink, indtil opkaldet annulleres eller tilsluttes (eller timeout)	I annulleringsperioden, 30 sekunder: Bip i et sekund. Derefter høj tone i tre sekunder	I annulleringsperioden, 30 sekunder: Kort vibration i et sekund. Derefter vibration i tre sekunder.
Geohegnsalarm (er en lydløs alarm)	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Mobilnetværk ikke tilgængeligt	Ikke relevant	Ikke relevant	Dobbelt rødt kort blink	Ikke relevant	Ikke relevant
Lavt batteriniveau (<20 %)	Ikke relevant	Lyser ikke	Kort blink hvert 3. sekund	Dobbelt bip (én gang)	Vibration (én gang)
Indgående opkald	Besvar: SOS-knap	Ikke relevant	Ikke relevant	Ringesignal	Vibrator
Send sms	Sideknap	Ikke relevant	Ikke relevant	Tone	Vibrator
Kontrol af batteri	Sideknap	>80 %: Tre blink <80,	<20 %: 1 kort blink	Ikke relevant	>80 %: Tre vibrationer <80, men >20 %:

		men >20 %: To korte blink			To vibrationer. <20 %: 1 vibration
Slå fra	Sideknap + nødstopknap trykket ind samtidig	Ikke relevant	Lyser i ca. 5 sek., men kan vare helt op til 70 sekunder	Ikke relevant	Kort vibration efterfulgt af lang vibration


9.2 Careium 450, dockingstation

Status/funktion	Grøn LED
Strøm tilsluttet	Lyser
Ingen strøm	Fra

10 Installation

Når Careium 450 tilsluttes første gang eller efter opbevaring, bør den oplades i op til 3 timer for at opnå fuld batterikapacitet.

Slut strømadapteren til en stikkontakt, og slut ledningen fra strømforsyningen til dockingstationen til Careium 450. Den grønne LED på dockingstationen lyser op.

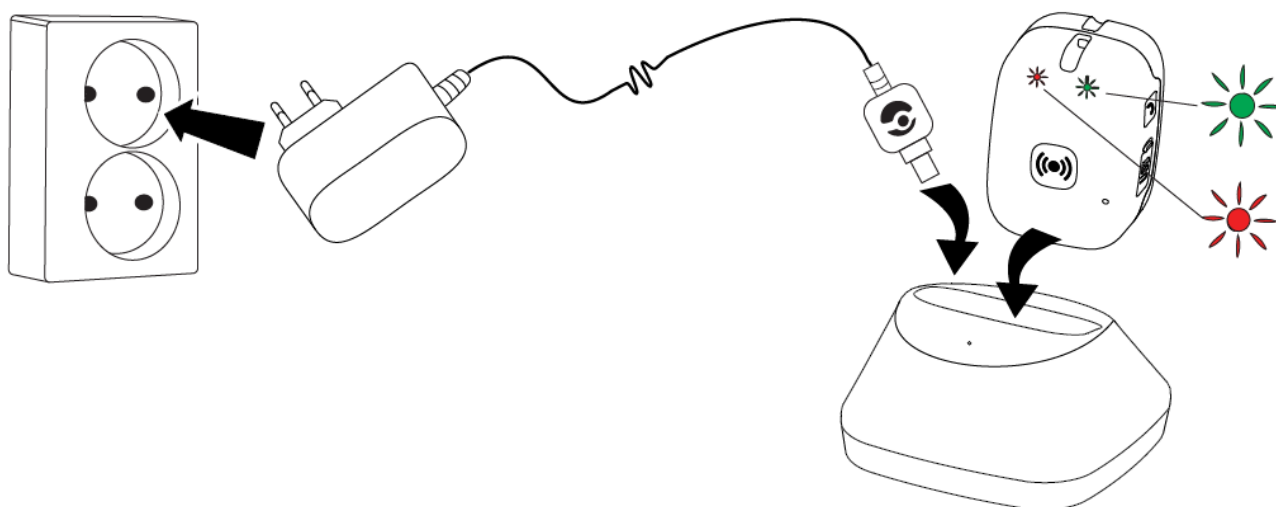

- Sæt Careium 450 i dockingstationen
- Bemærk! Careium 450 starter automatisk, når den sættes i dockingstationen.
- LED'en blinker rødt to gange med få sekunders mellemrum, indtil den er tilsluttet netværket. Efter ca. 30-60 sek. begynder den at blinke grønt, og den er nu klar til at blive konfigureret i i-care online. (OBS! Når batteriet er fuldt opladet, lyser den grønne lampe)

11 Konfiguration og indstillinger

Careium 450 understøttes af i-care® online, Careiums unikke webbaserede tjeneste, der leverer fjernovervågning, produktstyring, firmwareopgraderinger, konfiguration og support.

Tjenesten er tilgængelig 24/7, og det er altid muligt at se status for din Careium 450 i realtid.

Ud over bruger- og organisationsadministration kan følgende parametre indstilles

Adgangsrettighederne til Careium 450 opsættes i i-care online på samme måde som andre

Careium-produkter. Der er dog to nye adgangsrettigheder til Careium 450.

- Pårørende. Kun læseadgang med fokus på positionering
- Pårørende – admin. Adgang som ovenfor, men kan også indstille geohegn og administrere modtagere af SMS-alarmer.

11.1 Tilladelse af indgående opkald

Det er muligt at ringe direkte til enheden fra enhver telefontype. Hvis den er indstillet til Alle (standard), besvares alle opkald af enheden. Hvis den stilles på FRA, accepteres der ingen indgående opkald. Det er også muligt at hvidliste 3 numre, alarmbackupnummer 1-3 for blot

at lade disse numre gå igennem.

11.2 Svartilstand

Indgående opkald kan indstilles til at blive besvaret automatisk eller manuelt (standardindstilling). Hvis den er indstillet til manuelt, besvares opkaldet på nødknappen. Alle indgående opkald, bortset fra alarmgenererede opkald, kan også afsluttes via nødknappen.

11.3 Alarmbackupnummer

Alarmbackupnummeret har to funktioner. At hvidliste numre som nævnt ovenfor, men det fungerer også som alarmbackupnummer, hvis den normale alarmsekvens til alarmmodtageren mislykkes.

11.4 Alarmforsinkelse

Funktionen gælder kun for nødalarm (der er trykket på SOS-knappen).

Hvis den er indstillet til TIL (standardindstilling), udsender enheden en alarmlyd i 30 sekunder.

I dette tidsrum kan alarmen annulleres ved at trykke på sideknappen i to sek. Hvis den annulleres, sendes der ingen alarm til alarmmodtageren eller i-care online. Denne alarm registreres ikke i en log.

Hvis den er indstillet til FRA, lyder alarmen i tre sekunder, og brugeren kan ikke annullere alarmen.

11.5 Faldalarmens følsomhed

Faldalarmen kan indstilles til Fra, Normal og Høj.

Bemærk: Ved høj indstilling er enheden mere følsom over for falske alarmer.

11.6 Strømindikator

Når den er indstillet til Til (standard), blinker strømindikatoren på enheden grønt, når den er i tændt tilstand.

Når den er indstillet til Fra, slukkes det grønne blink.

Bemærk! Den røde indikator blinker rødt, når batteriet er mindre end 20 % opladt, også selvom indstillingen er sat til Fra.

11.7 Sideknap

Enheden kan sende en forudkonfigureret SMS til én modtager. SMS'en sendes direkte fra enheden til modtageren.

11.8 Geohegn

Careium 450 kan bruge tre geohegn.

UD af geohegnet: Alarmen afsendes, når enheden forlader dette geohegn.

Bemærk! Opladningsholder/beacon skal placeres indenfor dette geohegn! Der kan kun opsættes én UD af geohegnet.

IND i geohegnet: Alarmen afsendes, når enheden flyttes inden for dette hegn. Der kan opsættes to separate IND i geohegnet.

11.9 Adgangsrettigheder

Adgangsrettighederne til Careium 450 opsættes i i-care online på samme måde som andre

Careium-produkter. Der er dog to nye adgangsrettigheder til Careium 450.

- Pårørende. Kun læseadgang med fokus på positionering
- Pårørende – admin. Adgang som ovenfor, men kan også indstille geohegn og administrere modtagere af SMS-alarmer.

12 Vedligeholdelse

12.1 Rengøring

Når du rengør Careium 450, herunder tilbehør og kabler, må du kun bruge en let fugtet klud.

Brug ikke stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler til rengøringen.

12.2 Genbrug

Hvis Careium 450 genbruges hos en ny bruger, skal den nulstilles til fabriksindstillingerne og omprogrammeres

i henhold til den nye brugers oplysninger og krav.

13 Tekniske data

13.1 Careium 450, den bærbare enhed

Mål:	62 x 44 x 16 mm (L x B x H)
Vægt:	45 g
IP-klasse:	IP67
Temperatur:	Driftstemperatur -10 °C til +40 °C
Strømforbrug (typisk værdi):	
– Slukket tilstand:	4,4 µW
– Opkaldstilstand:	2 W
– Standby i netværk:	10 mW
Batteri:	Li-ION, 3,7 V, 800 mAh, 3,0 Wh
Standbytid:	Op til 5 dage med enheden aktivt i brug 12 timer i døgnet med mindst 1 times udendørs gåtur hver dag (nyt og fuldt opladet batteri)
Taletid:	Maks. udgangseffekt for 900-bånd: Tre timer Min. effekt for 1800-bånd: 12 timer
Alarmprotokol:	SCAIP, TS 50134-9 og taleopkald
RFID, modtager:	865-868 MHz.
Radiomodtagerkategori:	1
SIM-kortgrænseflade:	Indbygget nano-SIM

Mobilbånd

Teknologi	Bånd	TX-frekvens (MHz)	RX-frekvens (MHz)
GSM (2G)	GSM-900	880-915	925-960
	GSM-1800	1710-1785	1805-1880

Wi-fi:	Wi-fi-funktionen bruges kun til at hente placeringsoplysninger og sender ikke signaler.
USB:	Micro-USB-hunstik (Micro USB-B) (beregnet til Careium-certificerede adaptore)

13.2 Opladningsholder/beacon

Mål:	68 x 68 x 36 mm (L x B x H)
Vægt:	42 g
Farve:	Blå
RFID, sender:	865-868 MHz
USB:	Micro-USB-hunstik (Micro USB-B) (beregnet til Careium-certificerede adaptere)

13.3 Strømforsyning

Model (EU):	A31A-050500U-EU1
Model (UK):	S003ATB0500055
Indgangsspænding:	100-240 V
Indgangsvekselstrømsfrekvens:	50-60 Hz
Udgangsspænding:	5,0 VDC
Udgangsstrøm:	0,55-1,0 A
Udgangseffekt:	2,75-5,0 W
Kabellængde:	1,5 m fast kabel
Brugergrænseflade:	USB-B Micro-hanstik

13.4 Miljø

Apparatet har IP-klasse 67 og modstår støvpartikler samt vand i op til 30 minutter. Dette kræver,

at gummiforseglingen over USB-porten er korrekt lukket/forseglet. Bemærk! Hvis USB-porten

ikke er lukket korrekt, er enheden ikke IP-klassificeret.

Opladningsholderen/beaconen har ingen IP-klassificering og skal opbevares indendørs og i et tørt miljø.

14 Miljøoplysninger

Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne 2006/66/EF (Batterier) og 2012/19/EU (WEEE). Disse direktiver regulerer produktansvaret

for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier med henblik

på at øge genanvendelsen og mindske mængden af affald. Careium 450 er mærket

med en skraldespand med et kryds over, hvilket indikerer, at den skal afleveres på en genbrugsstation.

Produktet kan returneres vederlagsfrit til en genbrugsstation, som er tilknyttet CAREIUM eller distributøren direkte eller via et genbrugssystem. Kontakt distributøren, eller besøg vores websted på www.Careium.com/care/ for at få yderligere oplysninger.

Bemærk! Oplysninger om affald af elektrisk og elektronisk udstyr gælder kun for EU-medlemsstater. Kontrollér gældende lokale bestemmelser eller kontakt distributøren for oplysninger om andre lande.

Fremstillet i overensstemmelse med EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS2).

De materialer, der er anvendt i halsstrop, opfylder tekstilsikkerhedskravene i Øko-Text-standard 100.

14.1 Korrekt bortskaffelse af produkter




(Elektrisk og elektronisk affald)

(Gælder i lande med særlige indsamlingssystemer)

Dette symbol på selve produktet, dets tilbehør eller brugsanvisning betyder, at produktet

og dets elektroniske tilbehør (f.eks. opladere, headsets, USB-kabler) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at undgå at skade miljøet og menneskers sundhed bør disse dele sorteres separat og genanvendes for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialer. Hvis du har spørgsmål til, hvordan og hvor disse produkter skal genanvendes, skal du som privatperson kontakte købsstedet eller kommunen. Virksomheder skal kontakte deres leverandør og læse betingelserne i købsdokumentationen. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør må ikke blandes med andet erhvervsaffald. Dette produkt overholder RoHS-direktivet. Korrekt bortskaffelse

af batterier i dette produkt (gælder i lande med særlige indsamlingssystemer). Dette symbol

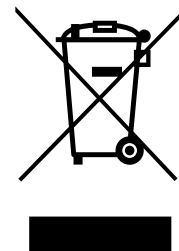

på batteriet, i vejledningen eller på emballagen, angiver, at batteriet i produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Hvor de forekommer, betyder de kemiske betegnelser Hg, Cd eller Pb, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly, der overstiger referenceniveauerne i EU's batteridirektiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer skade menneskers sundhed eller miljøet. For at beskytte naturressourcerne og fremme genbrug skal batterierne bortskaffes separat og genanvendes ved at anbringe dem i den kommunale batteriopsamlingsbeholder.

14.2 Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



(Gælder i lande med særlige indsamlingssystemer)

Dette symbol på batteriet, i vejledningen eller på emballagen, angiver, at batteriet i produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Hvor de forekommer, betyder de kemiske betegnelser Hg, Cd eller Pb, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly, der overstiger referenceniveauerne i EU's batteridirektiv 2006/66/EF. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer skade menneskers sundhed eller miljøet. For at beskytte naturressourcerne og fremme genbrug skal batterierne bortskaffes separat og genanvendes ved at anbringe dem i den kommunale batteriopsamlingsbeholder.

15 EU-overensstemmelseserklæring

Careium erklærer hermed, at radioudstyret Careium 450 er i overensstemmelse med direktiverne: 2014/53/EU og 2011/65/EU, herunder delegeret direktiv (EU) 2015/863 om ændring af bilag II.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd kan læses på følgende internetadresse: www.careium.com/dofc

16 UK-overensstemmelseserklæring

Careium erklærer hermed, at radioudstyrstypen Careium 450 er i overensstemmelse med den gældende lovgivning i UK.

UK-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd kan læses på følgende internetadresse: www.careium.com/dofc



© 2021 Copyright Careium AB

Manual_Careium_450_da_v12.docx

Careium AB, Jörgen Kocksgatan 1 B, 211 20 Malmö, Sverige

Virksomhedens identifikationsnummer: 556569-9740

www.careium.com

