

### Bruk av den automatiske falldetektoren Vibby Oak S fra Telecom Design.

Vibby Oak S konfigureres av installatøren din som enten armbånd eller smykke. Du må ikke endre hvordan den bæres uten å varsle installatøren din på forhånd.

Den må brukes til enhver tid for å kunne beskytte deg effektivt. Ved irritasjon kan du flytte produktet til den andre armen. Ved overfølsomhet eller høy risiko for allergi, bør Vibby Oak S brukes som anheng.

For ytterligere informasjon og ferspråklige versjoner: skann QR-koden.



### FUNKSJONER

Vibby Oak S er en enhet som gir beskjed ved fallulykker eller ved trykk på SOS-knappen. Dens funksjon er å sende en alarm til vaktentral via en trygghetsalarm som er installert i hjemmet.

#### Håndalarm (Fig.1):

Ved et uhell eller hvis du føler deg utrygg, kan du sende et manuelt SOS-varsel til din alarmsentral ved å bruke SOS-knappen. Knappen er lett releff og er plassert midt på Vibby Oak S. Produktet vil blinke og vibrere i noen sekunder. Det er da ikke lenger mulig å avbryte alarmen.

#### Automatisk alarm (Fig.2):

Etter et kraftig fall starter Vibby Oak S en analyseprosess og fastslår at du ikke er i stand til å reise deg igjen. Dersom fallet blir bekreftet, sendes alarmen til vaktentralen via din trygghetsalarm. Vibby Oak S varsler deg om at sendingen pågår ved å vibrere periodevis og blinke. For å avbryte alarmen manuelt, må du dekke Vibby Oak S helt med hånden og fjerne den så snart vibrasjonene opphører.

Vibby Oak S registrerer ikke alle fall. Hvis du faller og er i stand til det, må du alltid trykke på SOS-knappen for å være sikker på at varslingen blir sendt.



Figur 1

Figur 2



\* Avhengig av valgt abonnement.

\*\* Et tungt fall er et plutselig fall som inntreffer etter en periode med normal aktivitet i stående stilling. Det etterfølges av et kraftig støt mot gulvet som fører til bevisstløshet og manglende evne til å reise seg, preget av en periode med urårlighet på bakken.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

**Modell:** VB-WTC-10  
**Vekt:** 35g  
**Vannbestandighet:** IP67

**Støtbestandighet:** IK04  
**Renngjøring:** fuktig klut\*\*\*  
**Plastbehandling:** hypoallergen

	Radiofrekvens	Effekt
<b>TX Frequency band</b>	[868.0 – 868.6] MHz [868.7 – 869.2] MHz [863.0 – 870] MHz	14 dBm
<b>RX Frequency band</b>	[868.0 – 868.6] MHz [868.7 – 869.2] MHz [869.7 – 870] MHz [863.0 – 870] MHz	14 dBm
<b>BLE</b>	[2400 – 2483.5] MHz	10 dBm

**Radiorekkevidde:** 300 i åpent rom  
**Driftstemperatur:** +5°C / +40°C  
**Batteriets levetid:** maksimalt 3 år. Batteriet må byttes av installatøren din (CR2477 / LiMnO2).  
**Lagringsanbefalinger:**  
• **Temperatur:** +5°C / +40°C  
• **Fuktighet:** 80% maksimum  
• **Maksimum varighet:** 6 måneder

\*\*\* Unngå sterke rengjøringsmidler

**VIKTIG:** Teknologien i løsningen gjør det ikke mulig å analysere eller tolke alle situasjoner, og kan ikke oppdage alle typer fall. Enkelte fall, som for eksempel myke fall, kontrollerte fall eller bevegelser der man skilr ned langs en vegg eller setter seg på en stol, eller visse kraftige fall, blir ikke registrert av Vibby Oak S. I unntakstilfeller kan visse fallkonfigurasjoner og/eller spesielle bevegelser av armbåndet eller smykket bli tolket som et kraftig fall, selv om de ikke tilsvarer et faktisk fallscenario. Ved falsk alarm må situasjonen avklares raskt. For mer informasjon om automatisk fallregistrering eller hvordan produktet fungerer, se <https://telecomdesign.com/downloads/>

### FORSKRIFTER OG SERTIFISERINGER

Alle våre offisielle dokumenter og rapporter (radio, hypoallergen, REACH, RoHS, osv.) er tilgjengelige på <https://telecomdesign.com/downloads/>

#### EU-samsvarserklæring

Vi bekrefter herved at Vibby Oak S fra Telecom Design er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) og EC 1907/2006: NO\_SVHC REACH. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på <https://telecomdesign.com/downloads/>



**WEEE:** Kassering av utstyr fra private husholdninger i Den europeiske union. Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. Det er i stedet ditt ansvar å levere kassert utstyr til et godkjent innsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). For mer informasjon om hvor du kan levere utstyret, vennligst kontakt lokale myndigheter, renovasjonsselskapet eller forhandleren der du kjøpte produktet. NÅ batterier samles inn sammen med elektrisk og elektronisk utstyr i henhold til direktiv 2012/19/EU, skal disse tas ut av apparatene.

#### Produsentens adresse

Vibby Oak S er et produkt som er produsert av Telecom Design: Zone Actipolis II, 2bis rue Nully de Harcourt, 33610 Canéjan - Frankrike



#### Forsiktig: batteri

- Batteriet må ikke svelges. Fare for kjemisk forbrenning.
- Dette produktet inneholder et flatt batteri (knappebatteri). Hvis knappebatteriet svelges, kan det forårsake alvorlig, innvendig forbrenning i løpet av bare 2 timer, og kan medføre dødsfall.

- Oppbevar nye og brukte batterier utlignelig for barn. Hvis batterier ikke lukkes skikkelig, må produktet ikke brukes. Det må oppbevares utlignelig for barn. Hvis du tror at batterier kan ha bli svelget eller ført inn i en kroppsdell, må lege kontaktes umiddelbart.
- Eksplosjonsfare hvis batterier erstattes med et batteri av feil type.
- Hvis batteriet kastes i et ilddsted eller en varm ovn, eller hvis et batteri knuses eller skjæres opp mekanisk, kan det føre til eksplosjon.
- Hvis et batteri etterlates i omgivelser med svært høye temperaturer, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.



IP 67

### Användning av den automatiska falldetektorn Vibby Oak S från Telecom Design.

Vibby Oak S ställs in av din installatör som antingen armband eller halsband. Du får inte ändra hur produkten bärs utan att först informera din installatör.\*

Den måste bäras dygnet runt för att kunna skydda dig på ett effektivt sätt. Vid eventuell hudirritation, bär produkten på den andra armen. Vid kraftig känslighet eller hög risk för allergi, bör Vibby Oak S bäras som ett hängsmycke.

Ytterligare information och flerspråkiga versioner: skanna QR-koden



### FUNKTIONER

Vibby Oak S är en larmknapp som informerar vid tunga fall eller vid tryck på SOS-knappen. Dess funktion är att vidarebefordra ett larm till en larmcentral via en sändare som är installerad i hemmet.


#### Manuellt larm (Fig.1):

Vid en olycka eller om du känner dig otrygg kan du skicka ett manuellt SOS-larm till din larmcentral med hjälp av SOS-knappen. Den känns igen på en lätt upphöjning och sitter i mitten på Vibby Oak S. Produkten blinkar och vibrerar i några sekunder. Det går därefter inte att avbryta larmet.

#### Automatiskt larm (Fig.2):

Vid ett kraftigt fall påbörjar Vibby Oak S en analysprocess och avgör om du inte kan resa dig upp. Om fallet bekräftas skickas ett larm till larmcentralen via din sändare. Din Vibby Oak S meddelar dig att larmet skickas genom att vibrera periodvis och blinka. För att avbryta larmet manuellt måste du täcka över Vibby Oak S med handen och sedan ta bort den så snart vibrationerna upphör.

Vibby Oak S upptäcker inte alla fall. Vid ett fall bör du alltid trycka på SOS-knappen om du har möjlighet, för att säkerställa att larmet skickas iväg.

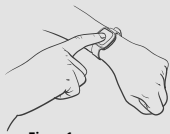

Figur 1



Figur 2

\* Beroende på val av abonnemang.

\*\* Ett kraftigt fall är ett plötsligt fall som inträffar efter en period av normal aktivitet i upprätt ställning. Det följs av en kraftig stöt mot marken som leder till medvetlöshet och en oförmåga att resa sig, kännetecknad av en period av stillaliggande på marken.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

**Modell:** VB-WTC-10  
**Vikt:** 35g  
**Vattentäthet:** IP67

**Stöttålighet:** IK04  
**Rengöring:** fuktig trasa\*\*\*  
**Plastmaterial:** hypoallergen

	Radiofrekvens	Effekt
<b>TX Frequency band</b>	[868.0 – 868.6] MHz [868.7 – 869.2] MHz [863.0 – 870] MHz	14 dBm
<b>RX Frequency band</b>	[868.0 – 868.6] MHz [868.7 – 869.2] MHz [869.7 – 870] MHz [863.0 – 870] MHz	14 dBm
<b>BLE</b>	[2400 – 2483.5] MHz	10 dBm

**Radioräckvidd:** 300 m i fritt fält  
**Drifttemperatur:** +5°C / +40°C  
**Batteriets livslängd:** maximalt 3 år. Batteribytet måste utföras av din installatör (CR2477 / LiMnO2).  
**Förvaringsrekommendationer:**  
• **Temperatur:** +5°C / +40°C  
• **Luftfuktighet:** max 80%  
• **Maximal livslängd:** 6 månader

\*\*\* Inga rengöringsmede

**VIKTIGT:** Tekniken i lösningen gör det inte möjligt att analysera eller tolka alla situationer eller att upptäcka alla typer av fall. Vissa fall, såsom «mjuka fall», kontrollerade fall eller nedsättningar mot en vägg eller på en stol, eller vissa tunga fall, upptäckts inte av Vibby Oak S. I undantagsfall kan vissa fallkonfigurationer och/eller vissa rörelser hos armband eller hängsmycket analyseras som ett tungt fall, även om de inte motsvarar scenariot för ett tungt fall. Om ett falsklarm utlöses, klargör situationen omedelbart. För mer information om automatisk falldetektering eller produktens funktion, besök <https://telecomdesign.com/downloads/>

### FÖRESKRIFTER OCH CERTIFIERINGAR

Alla våra officiella dokument och rapporter (radio, hypoallergenisk, REACH, RoHS, etc.) finns tillgängliga på <https://telecomdesign.com/downloads/>

#### EU-försäkringen om överensstämmelse

Härmed intygar vi att Vibby Oak S från Telecom Design överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) och EC 1907/2006: NO\_SVCH REACH. En kopia av försäkringen om överensstämmelse finns tillgänglig på <https://telecomdesign.com/downloads/>



**WEEE:** Kassering av avfall från hushåll inom den Europeiska Unionen. Denna symbol på produkten eller dess förpackning indikerar att produkten inte får kastas tillsammans med ditt vanliga hushållsavfall. Istället är det ditt ansvar att kassera ditt avfall genom att lämna in det på en utsedd insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning (elavfall). För mer information om var du kan lämna in ditt avfall, vänligen kontakta din kommun, din lokala avfalls hanterings tjänst eller din återförsäljare. När batterier samlas in tillsammans med elektrisk och elektronisk utrustning i enlighet med direktiv 2012/19/EU, ska dessa avlägsnas från apparaterna.

#### Tillverkarens adress

Vibby Oak S är en produkt tillverkad av Telecom Design Zone Actipolis II, 2bis rue Nully de Harcourt, 33610 Canéjan, Frankrike



#### Varning: Batterier

- Svälj inte batteriet, risk för kemiska brännskador.
- Denna produkt innehåller ett knappcells batteri. Om knappcells batteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara två timmar, vilket kan leda till dödsfall.
- Håll nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om batterifacket inte går att stänga ordentligt, sluta använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn. Om du tror att batterier kan ha sväls eller placerats inuti någon del av kroppen, uppsök omedelbart läkare.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut mot en felaktig batterityp.
- Kassering eller förstörelse av batteriet genom eld, i en ugn, eller genom mekanisk krossning eller skärning kan leda till en explosion.
- Att lämna batteriet i en miljö med extremt höga temperaturer kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.



IP 67

Yderligere information og  
flersprogede versioner:  
Scan QR-koden



### Brug af den automatiske faldalarm Vibby Oak S fra Telecom Design.

Vibby Oak S er konfigureret af din installatør til at blive båret enten som armbånd eller som vedhæng. Du må ikke ændre måden, den bæres på, uden at give din installatør besked på forhånd.\*

Den skal bæres hele tiden for at kunne beskytte dig effektivt. Ved hudirritation bør produktet bæres på den anden arm. I tilfælde af høj følsomhed og stor risiko for allergi, bør Vibby Oak S bæres som et vedhæng.


### FUNKTIONER

Vibby Oak S er en enhed, der informerer i tilfælde af et hårdt fald eller ved tryk på SOS-knappen. Dens funktion er at sende en alarm til en vagtcentral via en sender, der er installeret i hjemmet.

**Manuel alarm (Fig.1):** I tilfælde af en ulykke, eller hvis du føler dig i fare, kan du sende en manuel SOS-alarm til din tryghedscentral ved hjælp af SOS-knappen. Den er markeret med et let relief og er placeret i midten af Vibby Oak S. Produktet blinker og vibrerer i nogle sekunder. Herefter er det ikke muligt at annullere alarmen.

**Automatisk alarm (Fig.2):** Efter et kraftigt fald foretager Vibby Oak S en analyseprocedure og konstaterer, at du ikke kan rejse dig op igen. Hvis faldet bekræftes, sendes alarmen til vagtcentralen via din sender. Din Vibby Oak S giver dig besked om, at afsendelsen er i gang, ved at vibrere periodisk og blinke. For at annullere alarmen manuelt skal du dække Vibby Oak S med hånden og fjerne den igen, så snart vibrationerne ophører.

Vibby Oak S registrerer ikke alle fall. Hvis du falder, og du er i stand til det, må du altid trykke på SOS-knappen for å sikre at alarmen blir sendt.

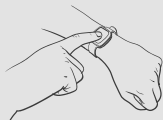

Figur 1



Figur 2

\* Afhængigt af valg af abonnement.

\*\* Et tungt fald er et pludseligt fald, der sker efter en periode med normal aktivitet i oprejst stilling. Det efterfølges af et kraftigt slag mod gulvet, der medfører bevidstløshed og en manglende evne til at rejse sig, karakteriseret ved en periode med ubevægelighed på gulvet.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Model:** VB-WTC-10  
**Vægt:** 35g  
**Vandtæthed:** IP67

**Stødfasthed:** IK04  
**Rengøring:** Fugtig klud\*\*\*  
**Plastbehandling:** hypoallergen

	Radiofrekvens	Effekt
<b>TX Frequency band</b>	[868.0 – 868.6] MHz [868.7 – 869.2] MHz [863.0 – 870] MHz	14 dBm
<b>RX Frequency band</b>	[868.0 – 868.6] MHz [868.7 – 869.2] MHz [869.7 – 870] MHz [863.0 – 870] MHz	14 dBm
<b>BLE</b>	[2400 – 2483.5] MHz	10 dBm

**Radiorekvevidde:** 300m i et frit område

**Driftstemperatur:** +5°C / +40°C

**Batteriets levetid:** Højest 3 år. Udsifting af batteriet skal udføres af din installatør (CR2477 / LiMnO2).

**Anbefalinger vedrørende opbevaring:**

- **Temperatur:** +5°C / +40°C
- **Fugtighed:** Højest 80 %
- **Maksimal varighed:** 6 måneder

\*\*\* Igen rengøringsmidler

**VIGTIGT:** Teknologiens løsninger gør det ikke muligt at analysere eller fortolke alle situationer og registrere alle typer fald. Visse fald, såsom bløde fald, kontrollerede fald eller nedsætninger mod en væg eller på en stol, samt visse hårde fald, registreres ikke af Vibby Oak S. I undtagelsestilfælde kan visse faldkonfigurationer og/eller specifikke bevægelser med armbåndet eller vedhængen blive analyseret som et hårdt fald, selvom de ikke svarer til scenarier for et hårdt fald. I tilfælde af en falsk alarm skal situationen hurtigt afklares. For yderligere information om automatisk faldregistrering eller produktets funktion, besøg venligst: <https://telecomdesign.com/downloads/>

### BESTEMMELSER OG CERTIFICERINGER

Alle vores officielle dokumenter og rapporter (radio, hypoallergen, REACH, RoHS osv.) er tilgængelige på <https://telecomdesign.com/downloads/>

#### EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at Vibby Oak S designet af Telecom Design, en afdeling af Telecom Design, er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre tilknyttede bestemmelser i Direktivene 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) og Forordning (EF) nr. 1907/2006 : NO\_SVHC REACH. En kopi af overensstemmelseserklæringen er tilgængelig for visning på <https://telecomdesign.com/downloads/>



**WEEE:** Bortskaffelse af affald fra husholdningsudstyr i Den Europæiske Union. Dette symbol på produktet eller dets emballage angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dit andet husholdningsaffald. Det er i stedet dit ansvar at bortskaffe dit affaldsudstyr ved at aflevere det på et dedikeret indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. For yderligere information om de pågældende indsamlingssteder bedes du kontakte din kommune, dit lokale renovationselskab eller din forhandler. Når batterier eller akkumulatører indsamles sammen med affald af elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU, skal de tages ud af apparaterne.

#### Producentens adresse

Vibby Oak S er et produkt fremstillet af Telecom Design: Zone Actipolis II, 2bis rue Nully de Harcourt, 33610 Canéjan – Frankrig

#### Vorsigt: Batterien



- Batteriet må ikke indtages, fare for kemisk forbrænding.
- Dette produkt indeholder et møntcellebatteri (knapcellebatteri). Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på kun 2 timer og kan føre til døden.
- Hold nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Hvis batterirummet ikke lukker korrekt, skal du stoppe med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du har mistanke om, at batterier er blevet slutt eller placeret i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert batteritype.
- Bortskaffelse eller destruktion af batteriet ved ild, i en oven, ved knusning eller mekanisk skæring kan medføre eksplosion.
- Efterlades batteriet i et miljø med ekstremt høje temperaturer, kan det medføre eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.



### Gebruik van de automatische valdetectie Vibby Oak S van Telecom Design.

De Vibby Oak S wordt door uw installateur geconfigureerd als polsband of als halsmedaillon. U mag de draagwijze niet wijzigen zonder uw installateur hiervan vooraf op de hoogte te stellen.\*

Het moet voortdurend worden gedragen om u effectief te kunnen beschermen. Draag het product bij irritatie om de andere arm. In het geval van sterke gevoeligheid en een hoog risico op allergie, moet de Vibby Oak S als hanger worden gedragen.

Aanvullende informatie en meertalige versies: scan de QR-code



### FUNCTIES

De Vibby Oak S is een apparaat dat een melding verstuurt in het geval van een zware val of bij een druk op de SOS-knop. De functie is het verzenden van een alarm naar een meldkamer via een zender die in de woning is geïnstalleerd.

#### Handmatig alarm (Fig.1):

Bij een ongeval of als u zich onveilig voelt, kunt u handmatig een SOS-alarm verzenden naar uw zorgcentrale via de SOS-knop. Deze knop is herkenbaar aan een lichte verhoging en bevindt zich in het midden van de Vibby Oak S. Het product knippert en trilt gedurende enkele seconden. Het is op dat moment niet meer mogelijk om het alarm te annuleren.

#### Automatisch alarm (Fig.2):

Na een zware val start de Vibby Oak S een analyseprocedure en stelt vast dat u niet meer zelfstandig kunt opstaan. Indien de val wordt bevestigd, wordt er via uw zender een alarm naar de centrale voor hulpverlening op afstand gestuurd. Uw Vibby Oak S laat u weten dat de verzending bezig is door met tussenpozen te trillen en te knippen. Om het alarm handmatig te annuleren, moet u de Vibby Oak S met uw hand bedekken en deze weer weghalen zodra de trillingen stoppen.

De Vibby Oak S detecteert niet alle vallen. Indien u bent gevallen en u bent daartoe in staat, dient u altijd op de SOS-knop te drukken om er zeker van te zijn dat de melding correct wordt verzonden.



Figuur 1



Figuur 2

\* Afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm.

\*\* Een zware val is een plotselinge val die optreedt na een periode van normale activiteit in staande positie. Deze wordt gevolgd door een harde klap op de grond, wat leidt tot bewusteloosheid en het onvermogen om op te staan, gekenmerkt door een periode van bewegingsloosheid op de grond.

### TECHNISCHE KENMERKEN

**Model:** VB-WTC-10  
**Gewicht:** 35g  
**Waterdichtheid:** IP67

**Schokvastheid:** IK04  
**Reinigen:** vochtige doek\*\*\*  
**Kunststof:** hypoallergeen

	Radiofrequentie	Vermogen
<b>TX Frequency band</b>	[868.0 – 868.6] MHz [868.7 – 869.2] MHz [863.0 – 870] MHz	14 dBm
<b>RX Frequency band</b>	[868.0 – 868.6] MHz [868.7 – 869.2] MHz [869.7 – 870] MHz [863.0 – 870] MHz	14 dBm
<b>BLE</b>	[2400 – 2483.5] MHz	10 dBm

**Radiobereik:** 300 m in vrij veld  
**Bedrijfstemperatuur:** +5°C / +40°C  
**Gebruiksduur van de batterij:** maximum 3 jaar.  
De batterij moet door uw installateur vervangen worden (CR2477 / LiMnO<sub>2</sub>)

- Opslagaanwijzingen:**
- **Temperatuur:** +5°C / +40°C
  - **Vochtigheid:** max. 80%
  - **Maximale periode:** 6 maanden

\*\*\* Geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen

**BELANGRIJK:** De technologieën van deze oplossing maken het niet mogelijk om alle situaties te analyseren, te interpreteren of alle valincidenten te detecteren. Bepaalde vallen, zoals zachte vallen, gecontroleerde vallen of het glijden langs een muur of op een stoel, evenals sommige zware vallen, worden niet gedetecteerd door de Vibby Oak S. In uitzonderlijke gevallen kunnen bepaalde valconfiguraties en/of specifieke bewegingen van de armband of hanger geanalyseerd worden als een zware val, terwijl ze niet voldoen aan het scenario van een zware val. In het geval van een vals alarm dient u de situatie onmiddellijk te verduidelijken. Voor meer informatie over de automatische valdetectie of de werking van het product kunt u terecht op de website <https://telecomdesign.com/downloads/>

### REGELGEVINGEN EN CERTIFICERINGEN

Al onze officiële documenten en rapporten (radio, hypoallergeen, REACH, RoHS, enz.) zijn beschikbaar op <https://telecomdesign.com/downloads/>

#### EU-verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaren wij dat de Vibby Oak S van Telecom Design voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) en EC 1907/2006: NO\_SVHC REACH. Een kopie van de conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op <https://telecomdesign.com/downloads/>



**WEEE:** Verwijdering van afgedankte huishoudelijke apparatuur in de Europese Unie. Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat u dit product niet samen met uw andere huishoudelijk afval mag weggoien. Integendeel, het is uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur weg te gooien door deze in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de betreffende inzamelpunten kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw reinigingsdienst of uw wederverkoper. Wanneer batterijen of accu's tegelijk met afgedankte elektrische en elektronische apparatuur worden ingezameld overeenkomstig Richtlijn 2012/19/EU, moeten deze uit de apparaten worden verwijderd.

#### Adres van de fabrikant

De Vibby Oak S is een product vervaardigd door Telecom Design: Zone Actipolis II, 2bis rue Nully de Harcourt, 33610 Canéjan - Frankrijk.



#### Let op: Batterijen

- De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden.
- Dit product bevat een knoopbatterij (platte batterij). Als de knoopbatterij wordt ingeslikt, kan deze in slechts 2 uur tijd ernstige interne brandwonden en overlijden veroorzaken.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen. Indien het batterijvakje niet correct sluit, gebruikt u het product niet meer en houdt dit buiten bereik van kinderen. Als u denkt dat de batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, raadpleegt u onmiddellijk een arts.
- Explosiegevaar indien de batterij door een onjuist model batterij wordt vervangen.
- Door de batterij weg te gooien in of te vernietigen door middel van vuur, een oven, verplettering of mechanisch doorsnijden kan deze ontploffen.
- Door de batterij in een omgeving met hoge temperaturen te laten, kan deze ontploffen en kan brandbaar product of gas lekken.



IP 67